


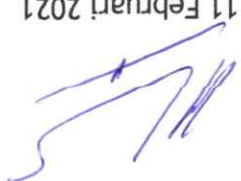



# INSTRUKSI KERJA PEMELIHARAAN CENTRIFUGE

NO DOKUMEN	:	UDDP-KAL-L3-013
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	05 Maret 2021
TANGGAL KAJI ULANG	:	05 Maret 2023
STATUS DOKUMEN	:	MASTER <input type="checkbox"/> SALINAN NO : <input type="checkbox"/>

Disusun oleh :	M. Ramadhana P, A.Md Petugas Seksi kalibrasi	UDD Pusat Palang Merah Indonesia
Diperiksa oleh :	Aripin, A.Md Kepala Seksi Kalibrasi	UDD Pusat Palang Merah Indonesia
Disetujui oleh :	dr. Srihartaty, M.Biomed Kepala Bidang Litbang & Produksi	UDD Pusat Palang Merah Indonesia
Disahkan oleh :	Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed Manajer Kualitas	UDD Pusat Palang Merah Indonesia

Tanda tangan :	Tanggal
	: 08 Februari 2021
Tanda tangan :	Tanggal
	: 09 Februari 2021
Tanda tangan :	Tanggal
	: 10 Februari 2021
Tanda tangan :	Tanggal
	: 11 Februari 2021

MASTER

 <b>Palang Merah Indonesia</b> Unit Donor Darah Pusat	Bidang Litbang & Produksi		Sub.Bidang Pengawasan Mutu
	<b>INTRUKSI KERJA PEMELIHARAAN CENTRIFUGE</b>		
Halaman : 2 dari 3		Nomor : UDDP-KAL-L3-013	Versi : 001
Tanggal berlaku : 17 Feb 2021		Tanggal kadaluarsa : 17 Feb 2023	

## 1. Tujuan

IK ini sebagai petunjuk bagi petugas dalam mengatur dan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan pemeliharaan Centrifuge

## 2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh petugas laboratorium terkait

## 3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Centrifuge hendaknya digunakan sesuai dengan prosedur penggunaan alat.
- 3.2 Pembersihan alat dilakukan setelah alat selesai digunakan.
- 3.3 Jangka waktu pembersihan alat hendaknya ditetapkan sesuai dengan instruksi pembuatan alat.
- 3.4 Seluruh aktivitas penggunaan dan pembersihan alat hendaknya didokumentasikan di dalam cek list masing-masing alat.
- 3.5 Personil harus:
  - 3.5.1 Menguasai pelaksanaan prosedur penggunaan alat
  - 3.5.2 Memiliki pengetahuan mengenai alat yang digunakan.
  - 3.5.3 Telah mengikuti pelatihan untuk penggunaan dan pembersihan alat.
- 3.6 Peralatan yang tercemar darah sebelum dilakukan pembersihan hendaknya didesinfeksi terlebih dahulu dengan larutan alcohol 70% / Natrium Hipoklorit 0,05%;
- 3.7 Pemilihan bahan pembersih harus mempertimbangkan risiko pencemaran.

## 4. Referensi

- 4.1 Pedoman CPOB yang berlaku
- 4.2 Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasmateresis yang berlaku;
- 4.3 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah yang berlaku.
- 4.4 Manual alat

## 5. Definisi dan Singkatan

Peralatan adalah semua alat yang digunakan dalam proses penyediaan darah.

## 6. Bahan dan Alat


Sesuai dengan instruksi pemeliharaan masing-masing alat.

## 7. Prosedur

### 7.1 Persiapan peralatan

Langkah	Kegiatan
1	Persiapkan peralatan yang digunakan a. Kain halus dan menyerap cairan b. Tissue tanpa serat
2	Bahan yang digunakan

MASTER

 <b>Palang Merah Indonesia</b> Unit Donor Darah Pusat	Bidang Litbang & Produksi		Sub. Bidang Pengawasan Mutu	Tanggal berlaku : 17 Feb 2021 Tanggal kajuliah : 17 Feb 2023
	<b>INTRUKSI KERJA PEMELIHARAAN CENTRIFUGE</b>			Halaman : 3 dari 3 Nomor : UDDP-KAL-L3-013 Versi : 001

~ Soft detergent	~ Alkohol 70%
------------------	---------------

## 7.2 Persiapan Alat

Langkah	Kegiatan
1	Yakinkan dari alat ukur yang akan dilakukan perawatan dalam keadaan off.
2	Catat identitas alat ukur yang akan kalibrasi pada lembar hasil pemeriksaan

## 7.3 Pelaksanaan Perawatan

Langkah	Kegiatan
1	Letakkan sentrifuge pada tempat yang datar.
2	Gunakan tabung dengan ukuran dan tipe yang sesuai untuk tiap sentrifuge.
3	Pastikan beban telah seimbang sebelum sentrifuge dijalankan.
4	Pastikan bahwa penutup telah menutup dengan baik dan kencang sebelum sentrifuge dijalankan.
5	Hentikan segera bila beban tidak seimbang atau terdengar suara aneh.
6	Jangan mengoperasikan sentrifuge dengan tutup terbuka.
7	Jangan menggunakan sentrifuge dengan kecepatan yang lebih tinggi dari keperluan.
8	Jangan membuka tutup sebelum sentrifuge benar-benar telah berhenti.
9	Bersihkan sentrifuge setelah digunakan.
10	Bersihkan dinding bagian dalam dengan larutan antiseptik setiap minggu atau bila terjadi tumpahan atau ada tabung yang pecah.
11	Catat setiap kegiatan pada formulir perawatan alat

## 8. Riwayat Perubahan

MASTER

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	17 Februari 2021	- PPOB CPOB - 2018 - Manual book	Dokumen Baru



—