 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	LEMBAR CEKLIS PEMERIKSAAN UJI MUTU ANTI-A		Halaman : 1 dari 2 Nomor : UDDP-UM-L4-002 Versi : 001
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	Tgl. berlaku : 01 Okt 2022 Tgl. kaji ulang : 01 Okt 2024

Referensi :

- UDDP-UM-L2-001 SPO Uji Mutu Reagensia Produk UDDP
- UDDP-UM-L3-001 IK Pemeriksaan Uji Mutu Anti-A

Reagensia uji <ul style="list-style-type: none"> • No. Lot : • Tgl Kedaluwarsa : • Asal Sampel :
--


1. Tes Potensi (Tube test)

A. Persiapan Sampel

1. Siapkan sel darah golongan A dan AB masing-masing 3 buah, cuci 2 kali dengan saline dan 1 kali dengan larutan alsever
2. Buat suspensi 5 % (50 uL sel + 950 uL alsever)

B. Cara Kerja

1. Buat pengenceran anti A Normal (N), ½ 1/1024 (deret A1 s/ A11)
P.A 200 uL

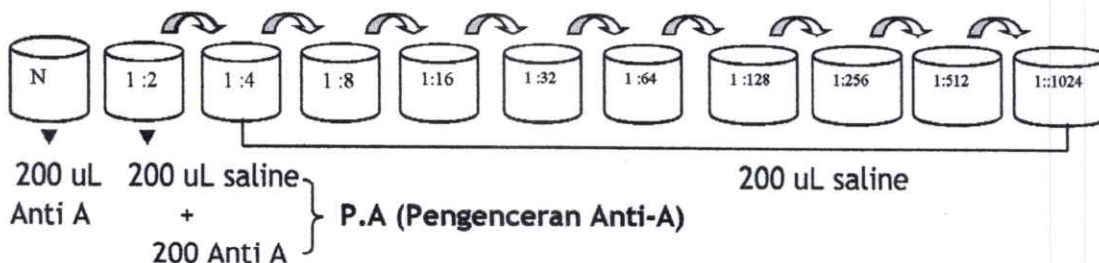

2. Siapkan 11 tabung beri identitas B1 s/d B11
3. Pindahkan 100 uL pengenceran Anti A tabung A11 ke B11, A10 ke B10, A9 ke B9 dst.
4. Tambahkan 50 uL sel A suspensi 5 % ke deret tabung A1 s/d A11
5. Tambahkan 50 uL sel AB suspensi 5 % ke deret tabung B1 s/d B11
6. Homogenkan, putar 3000 rpm 15 detik dan baca hasil

2. Tes Specificity (Tube test)

A. Persiapan Sampel

1. Siapkan golongan sel darah A,B,O masing-masing 3 buah dan AB masing-masing 2 buah
2. Buat suspensi sel 5 % dengan larutan alsever (1 : 19)
 (cth. 950 uL larutan alsever + 50 uL sel yg sudah dicuci)

B. Cara Kerja

1. Siapkan 11 buah tabung, beri identitas (A1, A2..B1,B2.,O1,O2..AB1 dst)

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**LEMBAR CEKLIS PEMERIKSAAN
UJI MUTU ANTI-A**

Bidang
Litbang & Produksi

Sub. Bidang
Pengawasan Mutu

Halaman : 2 dari 2
Nomor : UDDP-UM-L4-002
Versi : 001
Tgl. berlaku : 01 Okt 2022
Tgl. kaji ulang : 01 Okt 2024

2. Teteskan 100 uL anti A pada masing-masing tabung
3. Teteskan 50 uL suspensi sel 5 % atau sel panel pada masing-masing tabung sesuai identitas ☐
4. Homogenkan, putar 3000 rpm selama 15 detik dan baca hasil ☐

3. Tes Avidity (Slide Test)

A. Persiapan Sampel

1. Siapkan golongan sel darah A dan AB masing-masing 3 buah ☐
2. Buat suspensi sel 40 % dengan serum sendiri (2 : 3) ☐
(cth. 150 uL larutan alsever + 100 uL sel yg sudah dicuci)

B. Cara Kerja

1. Siapkan slide (*object glass*), beri identitas (A1, A2..AB1,AB2.. dst) ☐
2. Teteskan 50 uL anti A pada masing-masing slide ☐
3. Teteskan 25 uL suspensi sel 3 % pada masing-masing slide sesuai identitas ☐
4. Campur dan homogenkan menggunakan tip, ukur waktu reaksi menggunakan Stopwatch ☐

4. Volume (mL)

Cara Kerja

1. Ukur volume dengan memindahkan larutan ke dalam gelas ukur menggunakan mikropipet ukuran 1000 uL ☐
2. Catat hasil ☐

Tanggal :

Diperiksa oleh :

Dicek oleh :

Disahkan Oleh :

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No: