
 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	LEMBAR CEKLIS PEMERIKSAAN UJI MUTU ELSEVER		Halaman : 1 dari 1 Nomor : UDDP-UM-L4-018 Versi : 001 Tgl. berlaku : 01 Okt 2022 Tgl. kaji ulang : 01 Okt 2024
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

Referensi :

- UDDP-UM-L2-001 SPO Pemeriksaan Uji Mutu Reagensia Produk UDDP
- UDDP-UM-L3-009 IK Pemeriksaan Uji Mutu Elsever

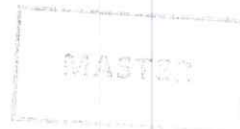

Reagensia • No. Lot : • Tanggal Kedaluarsa: • Asal Sampel :

1. Persiapan sampel

Siapkan sel golongan darah O dari 3 individu yang berbeda (O1,O2,O3)

Tabung Uji	
Ambil 50 ul sel darah merah pekat (O1,O2,O3)	<input type="checkbox"/>
Cuci masing -masing sel 3x dengan elsever uji	<input type="checkbox"/>
Buat suspensi 5 % (50 ul sel darah merah pekat + 950 ul Elsever uji)	<input type="checkbox"/>

2. Cara kerja

Pemeriksaan kadar keasaman (pH)


Kadar pH	
pH Meter	
Masukkan pH meter pada cairan elsever uji (control pH 4 & control pH 7)	<input type="checkbox"/>
Diamkan hingga nilai tera pada alat, stabil	<input type="checkbox"/>
Baca hasil	<input type="checkbox"/>

3. Pemeriksaan Hemolisis

Makroskopis	Pembesaran 10x	Pembesaran 40x	Pembesaran 100x
Putar susupensi sel 5% dengan kecepatan 3000 rpm, selama 15 detik <input type="checkbox"/>	Tetaskan suspense sel 5% pada objek glass <input type="checkbox"/>	Tetaskan suspense sel 5% pada objek glass <input type="checkbox"/>	Tetaskan suspense sel 5% pada objek glass <input type="checkbox"/>
Lihat reaksi hemolisis <input type="checkbox"/>	Buat hapusan darah <input type="checkbox"/>	Buat hapusan darah <input type="checkbox"/>	Buat hapusan darah <input type="checkbox"/>
	Lihat reaksi hemolisis pada pembesaran 10x <input type="checkbox"/>	Lihat reaksi hemolisis pada pembesaran 40x <input type="checkbox"/>	Lihat reaksi hemolisis pada pembesaran 100x <input type="checkbox"/>

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	LEMBAR CEKLIS PEMERIKSAAN UJI MUTU ALSEVER		Halaman : 2 dari 1 Nomor : UDDP-UM-L4-018 Versi : 001 Tgl. berlaku : 01 Okt 2022 Tgl. kaji ulang : 01 Okt 2024
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

4. Pemeriksaan Pengerutan Sel Darah Merah

Makroskopis	Pembesaran 10x	Pembesaran 40x	Pembesaran 100x
Putar suspensi sel 5% dengan kecepatan 3000 rpm, selama 15 detik <input type="checkbox"/>	Tetesan suspensi sel 5% pada objek glass <input type="checkbox"/>	Tetesan suspensi sel 5% pada objek glass <input type="checkbox"/>	Tetesan suspensi sel 5% pada objek glass <input type="checkbox"/>
Kocok-kocok perlahan lihat kondisi sel darah merah apakah terjadi agerasi sel <input type="checkbox"/>	Buat hapusan darah <input type="checkbox"/>	Buat hapusan darah <input type="checkbox"/>	Buat hapusan darah <input type="checkbox"/>
	lihat kondisi sel darah merah secara mikroskopis pada pembesaran 10x apakah terjadi pengerutan sel <input type="checkbox"/>	Lihat kondisi sel darah merah secara mikroskopis pada pembesaran 40x apakah terjadi pengerutan sel <input type="checkbox"/>	Lihat kondisi sel darah merah secara mikroskopis pada pembesaran 40x apakah terjadi pengerutan sel <input type="checkbox"/>

Tanggal :
 Diperiksa oleh :
 Dicek oleh :
 Disahkan oleh :

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No : 01