





INSTRUKSI KERJA

PERSIAPAN PERALATAN UJI SARING IMLTD

NO DOKUMEN	:	UDDP-IMLTD-L3-010
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	01 DESEMBER 2022
TANGGAL REVIEW	:	01 DESEMBER 2024
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: <input type="checkbox"/> SALINAN NO: <input type="checkbox"/>

<p>Disusun oleh:</p> <p>Adi Teguh Prabowo, S.Si Ka.Sie. Rujukan Nasional UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan: </p> <p>Tanggal : 16 NOV 2022</p>
<p>Diperiksa oleh:</p> <p>Arfat Iusianto, S.Si Ka.Subid. Rujukan Nasional UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan : </p> <p>Tanggal : 19 NOV 2022</p>
<p>Disetujui oleh:</p> <p>dr. Nova Surya Indah Hippy, M..Biomed Ka.Bid. Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan : </p> <p>Tanggal : 21 NOV 2022</p>
<p>Disahkan oleh:</p> <p>DR. dr. Saptuti Chunaeni, M. Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan : </p> <p>Tanggal : 24 NOV 2022</p>

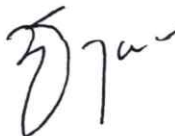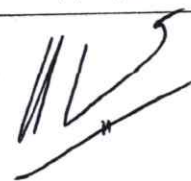

 <p>Palang Merah Indonesia</p> <p>Unit Donor Darah Pusat</p>	<p>IK</p> <p>PERSIAPAN PERALATAN UJI SARING IMLTD</p>		<p>Halaman 1 dari 2</p> <p>Nomor : UDDP-IMLTD-L3- 010</p> <p>Versi :001</p> <p>Tanggal berlaku: 01 Des 2022</p> <p>Tanggal kaji ulang: 01 Des 2024</p>
	<p>Bidang Pelayanan Darah</p>	<p>Sub. Bidang Rujukan Nasional</p>	

1. Tujuan

Intruksi kerja ini menjelaskan proses persiapan peralatan untuk pemeriksaan uji saring IMLTD.

2. Prosedur yang terkait

Standar Prosedur Operasional Persiapan Uji Saring IMLTD

3. Referensi

- 3.1. Unit Transfusi Darah Pusat, Pedoman Pelayanan Transfusi Darah, Buku 4, Edisi Ketiga 2007.
- 3.2. Formulir serah terima sampel - Penerimaan dan pengiriman sampel (UDDP-PDD-L4-022)
- 3.3. *Constantine, N.T., Retroviral testing and Quality Assurance*, 2005.
- 3.4. *Technical Manual AABB*, Edisi ke 15, 2005
- 3.5. *European Committe on Blood Transfusion, Guide to the Preparation Use and Quality Assurance of Blood Component*, 16Th Edition, 2010.

4. Peralatan

- 4.1. Rak Tabung
- 4.2. Mikropipet
- 4.3. Elisa Set
 - 4.3.1. Inkubator
 - 4.3.2. Washer
 - 4.3.3. Reader
- 4.4. Elisa Automatik
- 4.5. NAT
 - 4.5.1. *Reagent Preparation Inkubator (RPI)*
 - 4.5.2. *Tigris/Phanter System*


5. Bahan

- 5.1. Tip Kuning
- 5.2. Tip Biru
- 5.3. Tabung Reaksi
- 5.4. Kantong Limbah Kuning / *biohazard*

6. Instruksi Kerja

- 6.1. Gunakan alat pelindung diri (APD) (UDDP-IMLTD-L3-021) ketika mempersiapkan peralatan untuk uji saring IMLTD
- 6.2. Pastikan bahwa seluruh peralatan untuk uji saring IMLTD telah dilakukan validasi sebelum digunakan sesuai dengan ceklis persiapan peralatan untuk uji saring IMLTD (UDDP-IMLTD-L4-037)
- 6.3. Pastikan bahwa seluruh kebutuhan bahan habis pakai telah terpenuhi sebelum dilakukan pemeriksaan



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	IK PERSIAPAN PERALATAN UJI SARING IMLTD		Halaman 2 dari 2 Nomor : UDDP-IMLTD-L3- 010 Versi :001 Tanggal berlaku: 01 Des 2022 Tanggal kaji ulang: 01 Des 2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan Nasional	

3. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	01/12/2022		Dokumen baru

