



Palang
Merah
Indonesia

2022

Buku Panduan **SIMDONDAR**

**PENGUJIAN/IMLTD METODE
NAT – PROCLEIX PANTHER**


UNIT DONOR DARAH
PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI BALI

Modul ini khusus digunakan untuk konfirmasi hasil pengujian Sampel Donor (*Screening IMLTD*) metode NAT (Metode Nucleic Acid Test) mempergunakan instrument Procleix Panther Sistem.

Alur konfirmasi hasil pemeriksaan :

1. Hasil pemeriksaan dari mesin Procleix Panther di export pada mode LIS
2. Hasil export dibuka dari modul NAT pada SIMDONDAR
3. Konfirmasi hasil


I. LOGIN KE SIMDONDAR

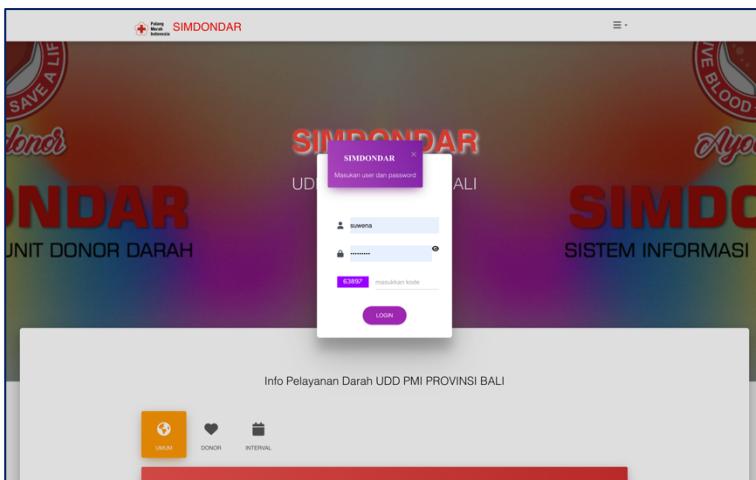


Masukkan **username**, **password** dan **angka acak** yang ditampilkan, kemudian Klik tombol **LOGIN**

II. Menu PANTHER NAT


- Ganti Level, pilih UJI SARING

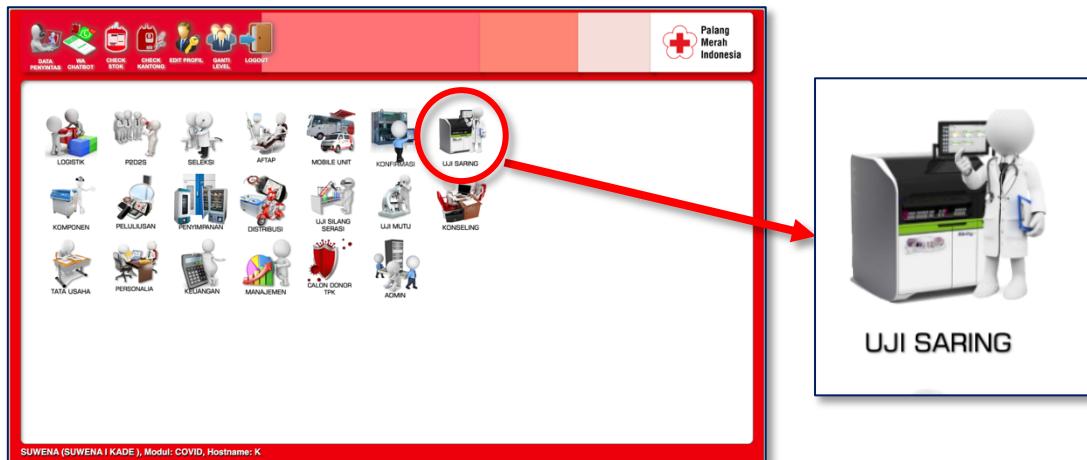

- Klik icon IMLTD KONEKSI pada barisan icon sisi atas

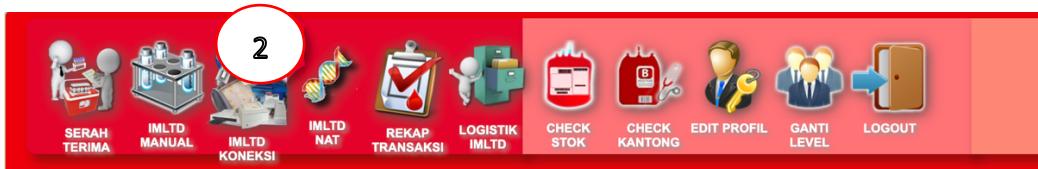


- Pilih Icon PANTHER NAT pada tampilan icon jenis-jenis mesin yang terkoneksi dengan SIMDONDAR

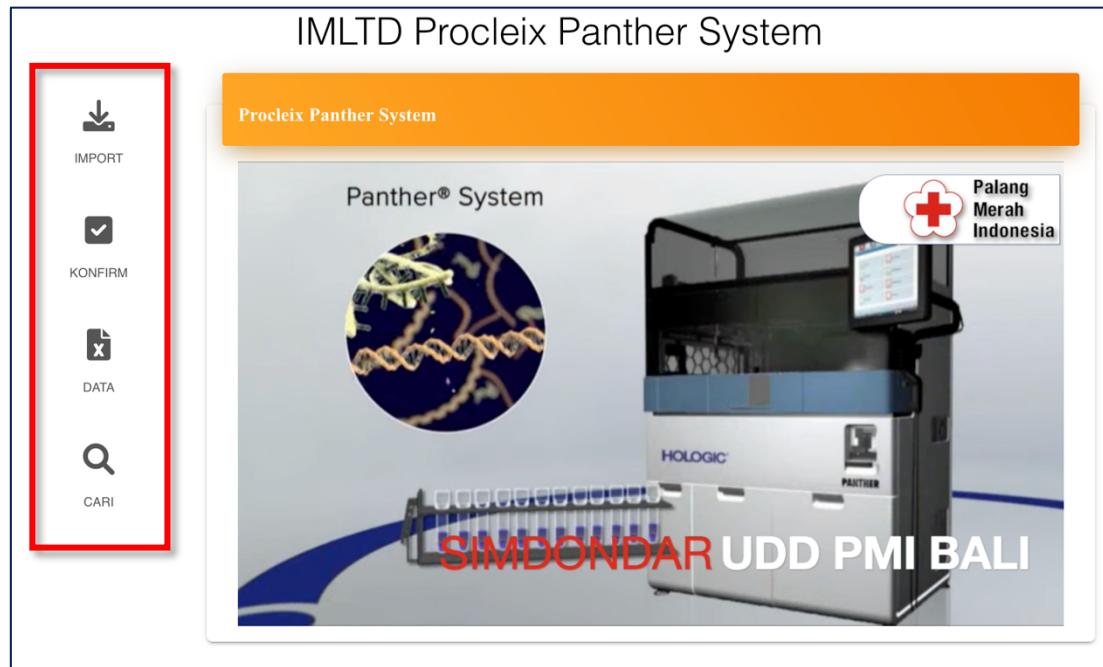


4. Terdapat 5 icon pada bagian kiri tampilan:
 - a. Icon Import untuk melakukan import data dari mesin
 - b. Icon Konfirmasi untuk melakukan konfirmasi hasil
 - c. Icon Data untuk melihat data pemeriksaan yang sudah dikonfirmasi
 - d. Icon Cari, untuk mencari nomor sampel yang pernah dilakukan pemeriksaan NAT
5. Saat kursor diarahkan ke salah satu icon pada sisi kiri, maka tampilan di sisi kanan akan berubah


III. IMPORT DATA DARI ALAT PANTHER

1. Arahkan kursor ke icon Import
2. Kemudian klik gambar di sisi kanan

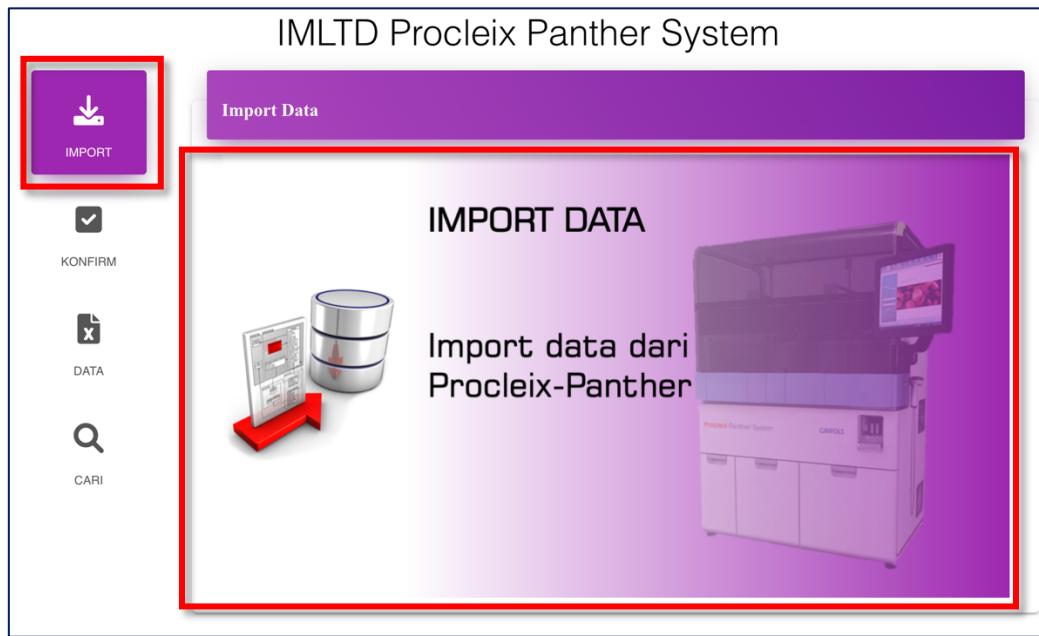

3. Klik pada kolom *Choose File* atau *Browse* (tergantung dari aplikasi peramban yang dipakai)

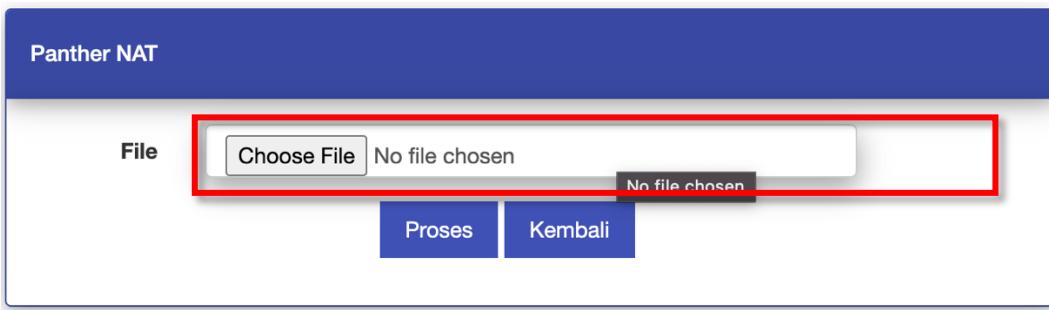

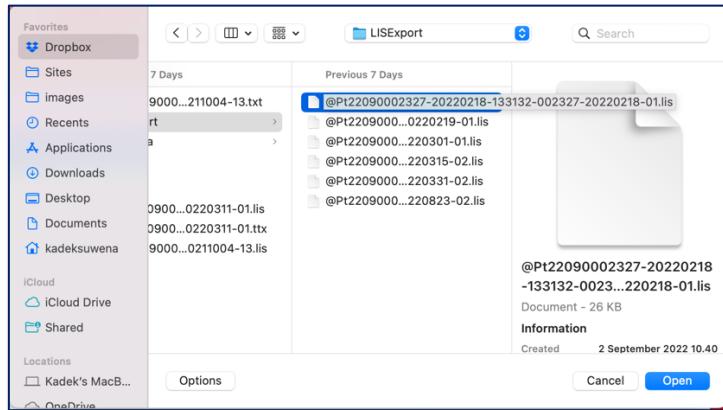

Tampilan ini akan berbeda-beda tergantung versi Sistem Operasi dan Aplikasi peramban (*browser*) yang dipergunakan

4. Arahkan ke file tempat dimana file export dari mesin disimpan, pilih filenya kemudian klik **Open**




5. Klik tombol **Proses**

Panther NAT																		
No	Query	Sample_id	Parameter	run_id	Flag	Status Hasil	OD	Hasil	Operator	Reagen Lot	Reagen ED	Sample Type	Sample Name	Ragam_name	Jam Mulai	Jam Hasil	Test Order	
1	OK	252370472115052326085		00237-2020331-02	Valid	0.05	Valid	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Calibrator	Negative Calibrator - Lot 704721	Ultro Elite	3/31/2022 11:28:44	3/31/2022 14:55:44	15895		
2	OK	252370472115052326085		00237-2020331-02	Valid	0.04	Valid	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Calibrator	Negative Calibrator - Lot 704721	Ultro Elite	3/31/2022 11:29:10	3/31/2022 14:55:44	15896		
3	OK	252370472115052326085		00237-2020331-02	Valid	0.07	Valid	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Calibrator	Negative Calibrator - Lot 704721	Ultro Elite	3/31/2022 11:29:37	3/31/2022 14:55:44	15897		
4	OK	2523704721150523211658		00237-2020331-02	Valid	14.40	Valid	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Calibrator	HBV Calibrator - Lot 704720	Ultro Elite	3/31/2022 11:30:03	3/31/2022 14:55:44	15898		
5	OK	2523704721150523211658		00237-2020331-02	Valid	13.73	Valid	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Calibrator	HBV Calibrator - Lot 704720	Ultro Elite	3/31/2022 11:30:29	3/31/2022 14:55:44	15899		
6	OK	252370472815062305940		00237-2020331-02	Valid	9.16	Valid	arysa	25704272150620	5/15/2023 23:59:59	Calibrator	HCV Calibrator - Lot 704728	Ultro Elite	3/31/2022 11:33:37	3/31/2022 15:00:45	15900		
7	OK	252370472815062305940		00237-2020331-02	Valid	9.25	Valid	arysa	25704272150620	5/15/2023 23:59:59	Calibrator	HCV Calibrator - Lot 704728	Ultro Elite	3/31/2022 11:34:04	3/31/2022 15:00:45	15901		
8	OK	252370469615052315069		00237-2020331-02	Valid	14.32	Valid	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Calibrator	HBV Calibrator - Lot 704696	Ultro Elite	3/31/2022 11:34:30	3/31/2022 15:00:45	15902		
9	OK	252370469615052315069		00237-2020331-02	Valid	14.66	Valid	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Calibrator	HBV Calibrator - Lot 704696	Ultro Elite	3/31/2022 11:34:57	3/31/2022 15:00:45	15903		
10	OK	R511564A	HW/HCV/HBV	00237-2020331-02	Valid	0.06	Nonreactive	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Specimen	R511564A	Ultro Elite	3/31/2022 12:13:42	3/31/2022 15:40:43	15904		
11	OK	R514898A	HW/HCV/HBV	00237-2020331-02	Valid	0.12	Nonreactive	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Specimen	R514898A	Ultro Elite	3/31/2022 12:14:08	3/31/2022 15:40:43	15905		
12	OK	R514894A	HW/HCV/HBV	00237-2020331-02	Valid	0.08	Nonreactive	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Specimen	R514894A	Ultro Elite	3/31/2022 12:14:33	3/31/2022 15:40:43	15906		
13	OK	R514898A	HW/HCV/HBV	00237-2020331-02	Valid	0.15	Nonreactive	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Specimen	R514898A	Ultro Elite	3/31/2022 12:15:01	3/31/2022 15:40:43	15907		
14	OK	R5141471A	HW/HCV/HBV	00237-2020331-02	Valid	0.05	Nonreactive	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Specimen	R5141471A	Ultro Elite	3/31/2022 12:15:27	3/31/2022 15:40:43	15908		
15	OK	R514935B	HW/HCV/HBV	00237-2020331-02	Valid	0.08	Nonreactive	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Specimen	R514935B	Ultro Elite	3/31/2022 12:18:43	3/31/2022 15:45:44	15909		
16	OK	R5147777A	HW/HCV/HBV	00237-2020331-02	Valid	0.10	Nonreactive	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Specimen	R5147777A	Ultro Elite	3/31/2022 12:18:50	3/31/2022 15:45:44	15910		
17	OK	R5147973A	HW/HCV/HBV	00237-2020331-02	Valid	0.07	Nonreactive	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Specimen	R5147973A	Ultro Elite	3/31/2022 12:18:57	3/31/2022 15:45:44	15911		
18	OK	R5147727A	HW/HCV/HBV	00237-2020331-02	Valid	0.11	Nonreactive	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Specimen	R5147727A	Ultro Elite	3/31/2022 12:20:04	3/31/2022 15:45:44	15912		
19	OK	R5147716A	HW/HCV/HBV	00237-2020331-02	Valid	0.11	Nonreactive	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Specimen	R5147716A	Ultro Elite	3/31/2022 12:20:30	3/31/2022 15:45:44	15913		
20	OK	R514884A	HW/HCV/HBV	00237-2020331-02	Valid	0.07	Nonreactive	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Specimen	R514884A	Ultro Elite	3/31/2022 12:23:46	3/31/2022 15:50:44	15914		
21	OK	R45404030A	HW/HCV/HBV	00237-2020331-02	Valid	0.05	Nonreactive	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Specimen	R45404030A	Ultro Elite	3/31/2022 12:24:14	3/31/2022 15:50:44	15915		
22	OK	R4540162A	HW/HCV/HBV	00237-2020331-02	Valid	0.10	Nonreactive	arysa	25704272150520	5/15/2023 23:59:59	Specimen	R4540162A	Ultro Elite	3/31/2022 12:24:42	3/31/2022 15:50:44	15916		

6. Akan ditampilkan data-data hasil pemeriksaan yang ditransfer
7. Klik tombol **Kembali**

IV. KONFIRMASI HASIL PEMERIKSAAN

- Arahkan kursor ke icon Konfirmasi

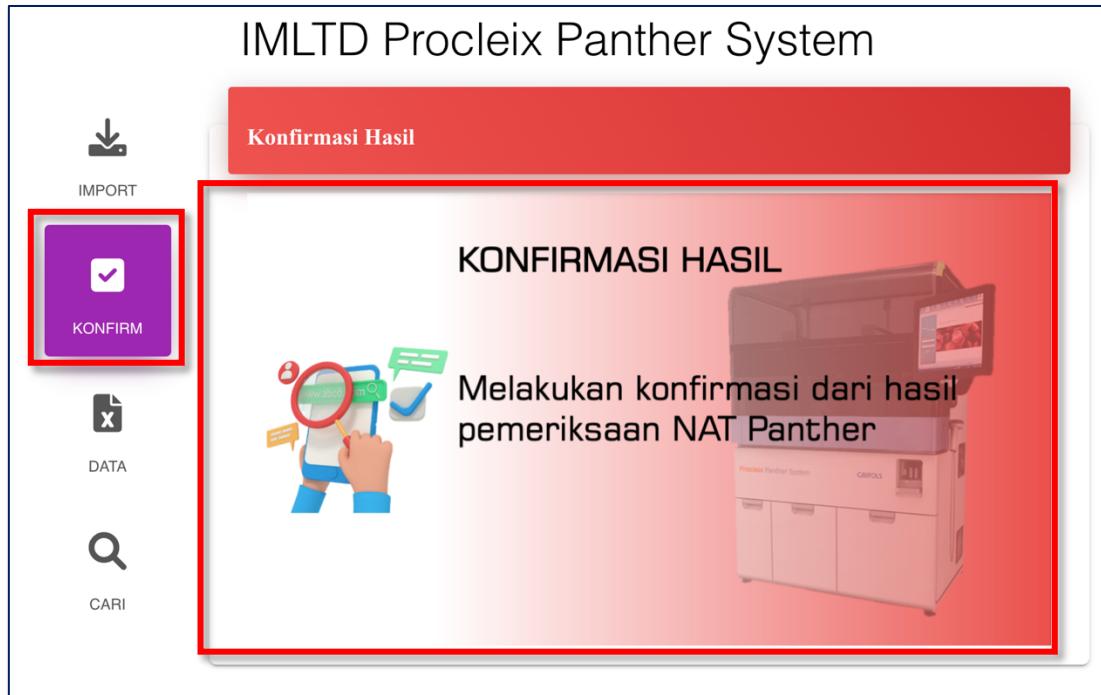

- Klik Konfirmasi Hasil di sisi kanan

Data Transfer Hasil NAT						
No	Tanggal Transfer	Run ID	Operator	Konfirmasi	Jumlah	
1.	2022-09-03	002327-20220218-01	AYUDIAN	Sudah	50	N030922-001
2.	2022-09-03	002327-20220301-01	aryasa	Sudah	24	N030922-002
3.	2022-09-03	002327-20220315-02	yudijaya	Sudah	53	N030922-003
4.	2022-09-03	002327-20220315-02	yudijaya	Belum	4	Konfirm/Hapus
5.	2022-09-03	002327-20220331-02	aryasa	Belum	144	Konfirm/Hapus

- Akan ditampilkan data-data hasil import dan status konfirmasi yang sudah dilakukan, secara standar data yang ditampilkan adalah data hasil import hari ini. Apabila membutuhkan untuk melihat data pada rentang waktu yang berbeda, klik tombol Filter Data

Filter Data

Tanggal	2022-09-03	s/d	2022-09-03
Konfirmasi	Semua		
Operator			

Reset Tampilkan

- a. Tentukan tanggal yang diinginkan
 - b. Tentukan statusnya (Semua, Belum dilakukan konfirmasi, atau Sudah Konfirmasi)

 - c. Tentukan Operator alat jika dibutuhkan
 - d. Klik tombol **Tampilkan**
4. Klik tombol **Konfirm** pada data Run_ID yang diinginkan

Data Transfer Hasil NAT


No	Tanggal Transfer	Run ID	Operator	Konfirmasi	Jumlah	
1.	2022-09-04	002327-20220218-01	AYUDIAN	Belum	50	Konfirm Hapus

Konfirmasi Hasil NAT Run ID: 002327-20220315-02

No	Sampel ID	Jenis Sampel	Parameter	Flags	OD	Hasil	Status Kantong	Aksi
1.	R3770985A	Specimen	HIV/HCV/HBV		0.06	Nonreactive	Keluar	<input type="button" value="Sehat"/>
2.	R3771624A	Specimen	HIV/HCV/HBV		0.10	Nonreactive	Keluar	<input type="button" value="Sehat"/>
3.	R3770681A	Specimen	HIV/HCV/HBV		0.13	Nonreactive	Keluar	<input type="button" value="Sehat"/>
4.	R3770702A	Specimen	HIV/HCV/HBV		0.06	Nonreactive	Keluar	<input type="button" value="Sehat"/>


Parameter	HIV/HCV/HBV	Operator	YUDI SANJAYA I PUTU, AMD.AK
Nama Reagen	Ultra Elite	Petugas Konfirmasi	ARYA ARYASA I KETUT
Nomor Lot	257042721505230	Disahkan oleh	DARMAASIH NI MADE
Tanggal ED	2023-05-15		

5. Tentukan status konfirmasi bila ingin melakukan perubahan, jenis aksinya adalah:

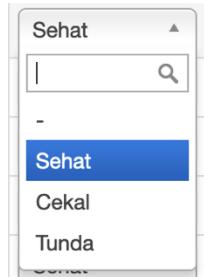

- Pilihan (-) adalah sampel yang diperiksa bukan berasal dari sampel donor yang sudah masuk ke SIMDONDAR
- Pilihan **Sehat** akan secara otomatis diberikan apabila hasil pemeriksaan *Nonreactive* dan sampel yang diperiksa adalah sampel dari data donor yang sudah masuk pada SIMDONDAR
- Pilihan **Cekal** akan secara otomatis diberikan apabila hasil pemeriksaan *Reactive* dan sampel yang diperiksa adalah sampel dari data donor yang sudah masuk pada SIMDONDAR
- Pilihan **Tunda** dapat dipilih apabila diinginkan untuk menunda konfirmasi dari hasil pemeriksaan atas sampel yang dipilih

6. Tentukan Operator Alat
7. Tentukan Petugas yang melakukan konfirmasi
8. Tentukan Petugas yang akan melakukan pengesahan hasil
9. Klik tombol **Konfirmasi Hasil**

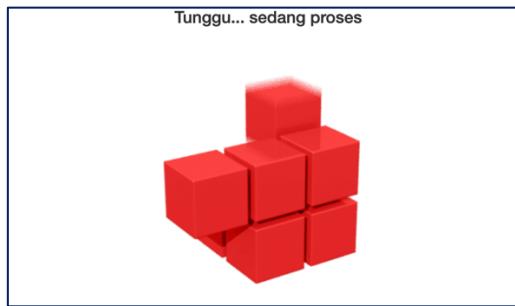

Tampilan ini akan dimunculkan selama proses SIMDONDAR melakukan konfirmasi hasil pemeriksaan

10. Tunggu beberapa saat sampai tampilan berubah ke pencetakan hasil Konfirmasi pemeriksaan NAT

Cetak Konfirmasi hasil NAT Procleix Panther

Kembali

HASIL PENGUJIAN IMLTD METODE NAT - PROCLEIX PANTHER No. N040922-001

UDDBALI-PD-UJS-L4-999
Versi 001

No	Tes Order	Sampel	Flag	Status Hasil	OD	Hasil	Jenis Sampel	Jam Mulai	Jam Selesai
1.	15628	252570472115052327024		Valid	0.05	Valid	Calibrator	2022-02-18 13:31:32	2022-02-18 16:58:33
2.	15629	252570472115052327024		Valid	0.15	Valid	Calibrator	2022-02-18 13:31:59	2022-02-18 16:58:33
3.	15630	252570472115052327024		Valid	0.12	Valid	Calibrator	2022-02-18 13:32:25	2022-02-18 16:58:33
4.	15631	252470472015052321594		Valid	12.77	Valid	Calibrator	2022-02-18 13:32:51	2022-02-18 16:58:33
5.	15632	252470472015052321594		Valid	11.85	Valid	Calibrator	2022-02-18 13:33:17	2022-02-18 16:58:33
6.	15633	252370472815062306108		Valid	9.13	Valid	Calibrator	2022-02-18 13:36:30	2022-02-18 17:03:33
7.	15634	252370472815062306108		Valid	9.16	Valid	Calibrator	2022-02-18 13:36:56	2022-02-18 17:03:33
8.	15635	252670469615052315081		Valid	13.69	Valid	Calibrator	2022-02-18 13:37:23	2022-02-18 17:03:33
9.	15636	252670469615052315081		Valid	13.95	Valid	Calibrator	2022-02-18 13:37:49	2022-02-18 17:03:33
10.	15637	R4267003A		Valid	14.54	Reactive	Specimen	2022-02-18 13:38:15	2022-02-18 17:03:33
11.	15638	R4267401A		Valid	0.07	Nonreactive	Specimen	2022-02-18 13:41:29	2022-02-18 17:08:33
12.	15639	R4267002A		Valid	0.07	Nonreactive	Specimen	2022-02-18 13:41:56	2022-02-18 17:08:33
13.	15640	R4266586A		Valid	0.07	Nonreactive	Specimen	2022-02-18 13:42:22	2022-02-18 17:08:33
14.	15641	R4264476A		Valid	0.07	Nonreactive	Specimen	2022-02-18 13:42:48	2022-02-18 17:08:33
15.	15642	R4269955A		Valid	0.08	Nonreactive	Specimen	2022-02-18 13:43:14	2022-02-18 17:08:33
16.	15643	R4265516A		Valid	0.04	Nonreactive	Specimen	2022-02-18 13:46:29	2022-02-18 17:13:33
17.	15644	R4270140A		Valid	0.08	Nonreactive	Specimen	2022-02-18 13:46:56	2022-02-18 17:13:33
18.	15645	R4265943A		Valid	0.10	Nonreactive	Specimen	2022-02-18 13:47:23	2022-02-18 17:13:33
19.	15646	R4269907A		Valid	0.11	Nonreactive	Specimen	2022-02-18 13:47:49	2022-02-18 17:13:33
20.	15647	R4267416A		Valid	0.07	Nonreactive	Specimen	2022-02-18 13:48:15	2022-02-18 17:13:33
21.	15648	R4270222A		Valid	0.07	Nonreactive	Specimen	2022-02-18 13:51:30	2022-02-18 17:18:33

Cetak Konfirmasi hasil NAT Procleix Panther

Kembali

Cetak Konfirmasi hasil NAT Procleix Panther										
		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="Up"/>	<input type="button" value="Down"/>	3 of 3			<input type="button" value="-"/>	<input type="button" value="+"/>	Page Width
47.	15674	R4269941A			Valid	0.16	Nonreactive	Specimen	2022-02-18 14:16:55	2022-02-18 17:43:34
48.	15675	R4267235A			Valid	0.09	Nonreactive	Specimen	2022-02-18 14:17:21	2022-02-18 17:43:34
49.	15676	R4265996A			Valid	0.13	Nonreactive	Specimen	2022-02-18 14:17:48	2022-02-18 17:43:34
50.	15677	R4266949A			Valid	0.08	Nonreactive	Specimen	2022-02-18 14:18:14	2022-02-18 17:43:35

Run ID	002327-20220218-01
Parameter	HIV/HCV/HBV
Reagen	Ultra Elite
Nomor Lot	257042721505230
Tgl Kadaluarsa	2023-05-15 23:59:59

Keterangan	Nama Petugas	Paraf
Operator alat	AYUDIAN	
Dikonfirmasi oleh	YUDI SANJAYA I PUTU, AMD.AK	
Disahkan oleh	DARMAASIH NI MADE	

Halaman : 3 dari 3

11. Klik tombol **Cetak** untuk mencetak dokumen
12. Untuk kembali ke tampilan awal, klik tombol **Kembali**

V. DATA HASIL KONFIRMASI PEMERIKSAAN

13. Arahkan kursor ke icon Data




14. Klik Data Konfirmasi di sisi kanan

Data Pemeriksaan NAT Procleix Panther


No	Transaksi	Test Order	Sampel	Parameter	Run ID	Flag	Status Hasil	OD	Hasil	Operator	Nama Reagan	Lot Reagen	ED Reagen	Jenis Sampel	Jam
1.	N040922-001	15628	252570472115052327024		002327-20220218-01	Valid	0.05	Valid	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Calibrator	2022-02-1f	
2.	N040922-001	15629	252570472115052327024		002327-20220218-01	Valid	0.15	Valid	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Calibrator	2022-02-1f	
3.	N040922-001	15630	252570472115052327024		002327-20220218-01	Valid	0.12	Valid	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Calibrator	2022-02-1f	
4.	N040922-001	15631	252470472015052321594		002327-20220218-01	Valid	12.77	Valid	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Calibrator	2022-02-1f	
5.	N040922-001	15632	252470472015052321594		002327-20220218-01	Valid	11.85	Valid	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Calibrator	2022-02-1f	
6.	N040922-001	15633	252370472815062306108		002327-20220218-01	Valid	9.13	Valid	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Calibrator	2022-02-1f	
7.	N040922-001	15634	252370472815062306108		002327-20220218-01	Valid	9.16	Valid	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Calibrator	2022-02-1f	
8.	N040922-001	15635	252670469615052315081		002327-20220218-01	Valid	13.69	Valid	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Calibrator	2022-02-1f	
9.	N040922-001	15636	252670469615052315081		002327-20220218-01	Valid	13.95	Valid	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Calibrator	2022-02-1f	
10.	N040922-001	15637	R4267003A	HIV/HCV/HBV	002327-20220218-01	Valid	14.54	Reactive	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Specimen	2022-02-1f	
11.	N040922-001	15638	R4267401A	HIV/HCV/HBV	002327-20220218-01	Valid	0.07	Nonreactive	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Specimen	2022-02-1f	
12.	N040922-001	15639	R4267002A	HIV/HCV/HBV	002327-20220218-01	Valid	0.07	Nonreactive	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Specimen	2022-02-1f	
13.	N040922-001	15640	R4266586A	HIV/HCV/HBV	002327-20220218-01	Valid	0.07	Nonreactive	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Specimen	2022-02-1f	
14.	N040922-001	15641	R4264476A	HIV/HCV/HBV	002327-20220218-01	Valid	0.07	Nonreactive	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Specimen	2022-02-1f	
15.	N040922-001	15642	R4269955A	HIV/HCV/HBV	002327-20220218-01	Valid	0.08	Nonreactive	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Specimen	2022-02-1f	
16.	N040922-001	15643	R4265516A	HIV/HCV/HBV	002327-20220218-01	Valid	0.04	Nonreactive	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Specimen	2022-02-1f	
17.	N040922-001	15644	R4270140A	HIV/HCV/HBV	002327-20220218-01	Valid	0.08	Nonreactive	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Specimen	2022-02-1f	
18.	N040922-001	15645	R4265943A	HIV/HCV/HBV	002327-20220218-01	Valid	0.10	Nonreactive	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Specimen	2022-02-1f	
19.	N040922-001	15646	R4269907A	HIV/HCV/HBV	002327-20220218-01	Valid	0.11	Nonreactive	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Specimen	2022-02-1f	
20.	N040922-001	15647	R4267416A	HIV/HCV/HBV	002327-20220218-01	Valid	0.07	Nonreactive	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Specimen	2022-02-1f	
21.	N040922-001	15648	R4270222A	HIV/HCV/HBV	002327-20220218-01	Valid	0.07	Nonreactive	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Specimen	2022-02-1f	
22.	N040922-001	15649	R4267410A	HIV/HCV/HBV	002327-20220218-01	Valid	0.07	Nonreactive	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Specimen	2022-02-1f	
23.	N040922-001	15650	R4270074A	HIV/HCV/HBV	002327-20220218-01	Valid	0.09	Nonreactive	AYUDIAN	Ultrio Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Specimen	2022-02-1f	

15. Klik Filter Data

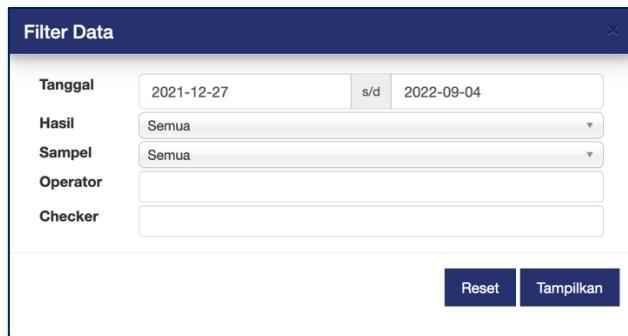


16. Tentukan tanggal


17. Tentukan jenis hasil yang diinginkan

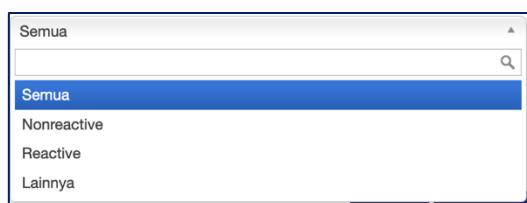

18. Tentukan jenis sampel

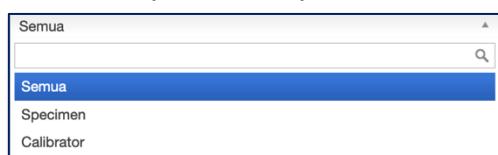

19. Ketik Operator dan atau checker bila diperlukan

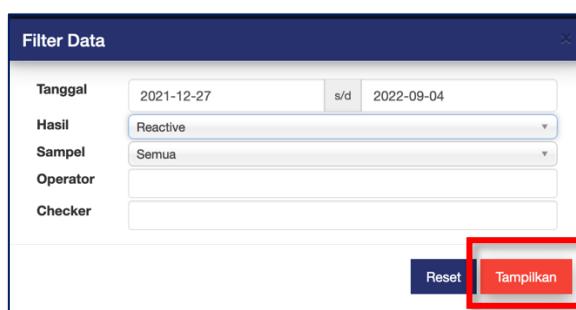

20. Klik tombol Tampilkan

Data Pemeriksaan NAT Procleix Panther															Filter Data	Kembali
No	Transaksi	Test Order	Sampel	Parameter	Run ID	Flag	Status Hasil	OD	Hasil	Operator	Nama Reagan	Lot Reagen	ED Reagen	Jenis Sampel	Jam Mulai	Jam Selesai
1.	N040922-001	15637	R4267003A	HIV/HCV/HBV	002327-20220218-01		Valid	14.54	Reactive	AYUDIAN	Ultrip Elite	257042721505230	2023-05-15 23:59:59	Specimen	2022-02-18 13:38:15	2022-02-18 13:38:15

VI. MENCARI DATA PEMERIKSAAN

21. Arahkan kursor ke icon **Cari**




22. Klik **Detail Hasil** di sisi kanan



23. Ketikkan nomor sampel

24. Tekan Enter atau tombol di sisi kanan Pengetikan nomor sampel

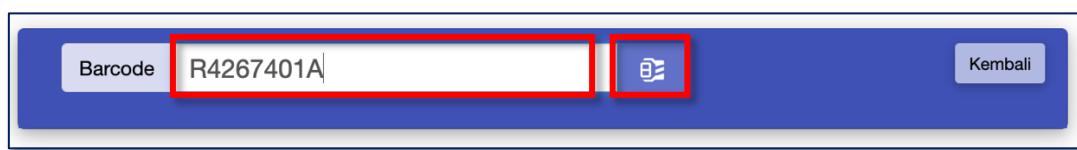

25. Bila nomor sampel yang dimasukkan benar, maka akan ditampilkan detail pemeriksaan sampel tersebut.

26. Apabila sampel merupakan sampel darah donor yang berasal dari donasi yang sudah masuk ke SIMDONDAR maka di sisi kanan akan ditampilkan resume data donasi yang diperlukan

The screenshot shows a software interface with a blue header bar. On the left, there is a barcode scanner icon and a text input field labeled "Barcode masukkan kode sampel". On the right, there is a "Kembali" (Back) button. Below the header, there are two main sections: "Data Pemeriksaan" (left) and "Data Donasi" (right), both enclosed in red boxes.

Data Pemeriksaan	
Nomor Sampel	R4267401A
No Order	15638
Run ID	002327-20220218-01
Flag	
Status	Valid
OD	0.07
Hasil	Nonreactive
Nama Reagen	Ultrio Elite
Parameter	HIV/HCV/HBV
Lot Reagen	257042721505230
ED Reagen	2023-05-15 23:59:59
Tipe Sampel	Specimen
Jam Mulai	2022-02-18 13:41:29
Jam Selesai	2022-02-18 17:08:33
Operator	AYUDIAN
Tgl Transfer data	2022-09-04 08:39:57
Status Konfirmasi	Sudah
No Transaksi	N040922-001
Petugas Konfirmasi	YUDIJAYA

Data Donasi	
Nomor Kantong	R4267401A
Kode Donor	5171MEARY000003
Golongan Darah	O
Rhesus	+
Jenis Donor	Donor Sukarela
Donor Baru/Lama	Donor Rutin
Umur	34
Jenis Kelamin	Laki-laki

27. Apabila nomor sampel yang dimasukkan tidak valid, akan muncul tampilan pemberitahuan bahwa nomor sampel tidak ditemukan

The screenshot shows a software interface with a blue header bar. On the left, there is a barcode scanner icon and a text input field labeled "Barcode masukkan kode sampel". On the right, there is a "Kembali" (Back) button. Below the header, there is a red rectangular box containing the following text:

Nomor sampel R4267402A
Tidak ditemukan!

28. Klik tombol **Kembali** untuk kembali ke tampilan awal menu NAT-Panther