
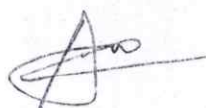

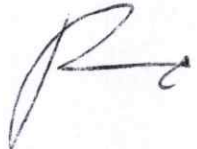



# INSTRUKSI KERJA PEMELIHARAAN BLOOD REFRIGERATOR

NO DOKUMEN	:	UDDP-KAL-L3-006
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	17 FEBRUARI 2023
TANGGAL KAJI ULANG	:	17 FEBRUARI 2025
STATUS DOKUMEN	:	MASTER <input type="checkbox"/> SALINAN NO : <input type="checkbox"/>

<p>Disusun oleh :</p> <p>M. Ramadhana P, A.Md. Petugas Seksi Kalibrasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan :</p>  <p>Tanggal : 9 Februari 2023</p>
<p>Diperiksa oleh :</p> <p>Aripin, A.Md.TEM. Kepala Seksi Kalibrasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan :</p>  <p>Tanggal : 10 Februari 2023</p>
<p>Disetujui oleh :</p> <p>dr. Srihartaty, M.Biomed. Kepala Bidang Litbang &amp; Produksi UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan :</p>  <p>Tanggal : 14 Februari 2023</p>
<p>Disahkan oleh :</p> <p>dr. Robby Nur Aditya, M.Si. Pjs. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan :</p>  <p>Tanggal : 16 Februari 2023</p>

MASTER

DOKUMEN TERKENDAL  
Salinan No :

 <b>Palang Merah Indonesia</b> Unit Donor Darah Pusat	<b>INTRUKSI KERJA PEMELIHARAAN BLOOD REFRIGERATOR</b>		Halaman : 1 dari 2 Nomor : UDDP-KAL-L3-006 Versi : 001
	Bidang Litbang & Produksi	Sub.Bidang Pengawasan Mutu (Kalibrasi)	Tanggal berlaku : 17 Feb 2023 Tanggal kaji ulang : 17 Feb 2025

1. Tujuan
- IK ini sebagai petunjuk bagi petugas dalam mengatur dan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan pemeliharaan Blood Refrigerator
2. Ruang Lingkup
- IK ini digunakan oleh petugas laboratorium terkait
3. Persyaratan Sistem Mutu
- 3.1 Blood Refrigerator hendaklah digunakan sesuai dengan prosedur penggunaan alat.
- 3.2 Pembersihan alat dilakukan setelah alat selesai digunakan.
- 3.3 Jangka waktu pembersihan alat hendaklah ditetapkan sesuai dengan instruksi pembuat alat.
- 3.4 Seluruh aktivitas penggunaan dan pembersihan alat hendaklah didokumentasikan di dalam cek list masing-masing alat.
- 3.5 Personil harus:
- 3.5.1 Menguasai pelaksanaan prosedur penggunaan alat
- 3.5.2 Memiliki pengetahuan mengenai alat yang digunakan.
- 3.5.3 Telah mengikuti pelatihan untuk penggunaan dan pembersihan alat.
- 3.6 Peralatan yang tercemar darah sebelum dilakukan pembersihan hendaklah didesinfeksi terlebih dahulu dengan larutan alcohol 70% / Natrium Hipoklorit 0,05%;
- 3.7 Pemilihan bahan pembersih harus mempertimbangkan risiko pencemaran.
4. Referensi
- 4.1 Pedoman CPOB yang berlaku
- 4.2 Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis yang berlaku;
- 4.3 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah yang berlaku.
- 4.4 Manual alat
5. Definisi dan Singkatan
- Peralatan adalah semua alat yang digunakan dalam proses penyediaan darah.
6. Bahan dan Alat
- Sesuai dengan instruksi pemeliharaan masing-masing alat.

7. Prosedur




7.1 Persiapan peralatan

Langkah	Kegiatan
1	Persiapkan peralatan yang digunakan <div>             a. Kain halus dan menyerap cairan             b. Pembersih bunga es             c. Tisue tanpa serat           </div>





 <b>Palang Merah Indonesia</b> Unit Donor Darah Pusat	<b>INTRUKSI KERJA PEMELIHARAAN BLOOD REFRIGERATOR</b>		Halaman : 2 dari 2 Nomor : UDDP-KAL-L3-006 Versi : 001
	Bidang Litbang & Produksi	Sub.Bidang Pengawasan Mutu (Kalibrasi)	Tanggal berlaku : 17 Feb 2023 Tanggal kaji ulang : 17 Feb 2025

2	Bahan cair yang digunakan ~ Soft detergent ~ Alkohol 70%
---	--

## 7.2 Persiapan Alat

Langkah	Kegiatan
1	Yakinkan dari alat ukur yang akan dilakukan perawatan dalam keadaan off.
2	Catat kegiatan perawatan pada formulir perawatan alat

## 7.3 Pelaksanaan Pemeliharaan

Langkah	Kegiatan
1	Letakkan instrument pada tempat yang datar (rata air).
2	Atur jarak antara alat dengan dinding $\pm$ 20 cm.
3	Periksa kerapatan karet-karet pintu
4	Bersihkan dinding bagian dalam dengan larutan antiseptik setiap minggu atau bila terjadi tumpahan darah dan reagent.
5	Bersihkan bunga es setiap bulan (defrost)
6	Cek batterai Alarm
7	Cek kertas rekam suhu (jika ada)
8	Bersihkan kisi-kisi evaforator
9	Cata suhu pada formilur suhu
10	Kuras wadah setiap bulan

## 8 Lampiran

- 8.1 Formulir Pemeliharaan Alat (UDDP-MK-L4-024)  
8.2 Formulir Pencatatan Penggunaan Alat (UDDP-MK-L4-025)

MASTER

## 9 Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	17 Februari 2021	- PPOB CPOB - 2018 - Manual Book	Dokumen Baru
001	17 Februari 2023	-	Dokumen telah dikaji ulang. Tidak ada perubahan.