


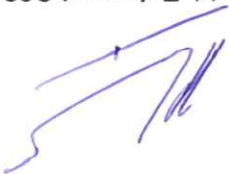



INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN ALAT ANAK TIMBANGAN

NO DOKUMEN	:	UDDP-KAL-L3-018
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	15 Februari 2021
TANGGAL KAJI ULANG	:	15 Februari 2023
STATUS DOKUMEN	:	MASTER <input type="checkbox"/> SALINAN NO : <input type="checkbox"/>

Disusun oleh : M. Ramadhana P, A.Md Staf kalibrasi Unit Donor Darah Pusat	Tanda tangan :  Tanggal : 08 Februari 2021
Diperiksa oleh : Aripin, A.Md Kepala Seksi Kalibrasi Unit Donor Darah Pusat	Tanda tangan :  Tanggal : 09 Februari 2021
Disetujui oleh : dr. Srihartaty, M.Biomed Kepala Bidang Litbang & Produksi Unit Donor Darah Pusat	Tanda tangan :  Tanggal : 10 Februari 2021
Disahkan oleh : Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed Manajer Kualitas Unit Donor Darah Pusat	Tanda tangan :  Tanggal : 11 Februari 2021

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INTRUKSI KERJA PENGUNAAN ANAK TIMBANG		Sub.Bidang Pengawasan Mutu	Litbang & Produksi Tanggung Jawab
	Halaman : 2 dari 3 Nomor : UDDP-KAL-L3-018 Versi : 001	Tanggal berlaku : 15 Feb 2021 Tanggal kadaluarsa : 15 Feb 2023		

1. Tujuan

Menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan Anak Timbang.

2. Prosedur Terkait

Prosedur UDDP-KAL-L3-004 Instruksi Kerja Kalibrasi Timbangan

3. Referensi

3.1 Manual Book
3.2 CSIRO 2010

4. Instruksi

4.1 Persiapan Peralatan

Langkah	Kegiatan
1	Thermohyrometer
2	Anak Timbang
3	Hemoscale/Timbangan Digital

4.2 Persiapan Alat

Langkah	Kegiatan
1	Pastikan suhu & kelembapan ruangan berada pada batas 20-24° C & 40-60%. Gunakan <i>thermohyrometer</i> untuk melihat suhu & kelembapan ruangan
2	Catat hasil pada formulir lembar kerja kalibrasi <i>Hemoscale/Timbangan Digital</i> (UDDP-KAL-L4-003)

4.3 Pelaksanaan Penggunaan Alat


Langkah	Kegiatan
1	Hidupkan <i>power hemoscale</i> /timbangan digital
2	Letakkan anak timbang di atas pan <i>hemoscale</i> /timbangan digital
3	Hasil berat <i>hemoscale</i> /timbangan digital akan terlihat di display <i>hemoscale</i>
4	Angkat anak timbang dari atas pan <i>hemoscale</i> /timbangan digital.





Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	15 Februari 2021	- Manual book - CSIRO 2010	Dokumen Baru

5. Riwayat Perubahan

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat		INTRUKSI KERJA PENGUNAAN ANAK TIMBANG		Sub.Bidang Pengawasan Mutu	Tanggal berlaku : 15 Feb 2021 Tanggal kajiulang : 15 Feb 2023
				Litbang & Produksi	
					Halaman : 3 dari 3 Nomor : UDDP-KAL-L3-018 Versi : 001